

# Clearblue®

## Graviditetstest

Digitalt Ultratidigt



För självtestning. Läs bruksanvisningen noga innan du testar.



Testa från  
**6 dagar**  
innan  
din utbeblivna mens!



Om du testar  
tidigt ska du  
använda dagens  
första urin  
Annars kan du testa när som helst



Drick inte stora  
mängder vätska  
innan du gör testet



Håll aldrig  
teststickan med  
spetsen uppåt

## 1 Testa

Ta ut teststickan från folien, ta av locket och använd omedelbart. **Antingen** testa i:



din  
urinstråle

eller



doppa  
hit upp

ett uppsamlat  
urinprov



**Ta bort uppsugningsspetsen från urinen när stoppljuset BÖRJAR blinka.**

Detta tar vanligtvis cirka 5 sekunder. Lampan fortsätter att blinka kort och släcks sedan. Håll uppsugningsspetsen riktad nedåt, sätt på locket igen och lägg teststickan på en plan yta.

## 2 Vänta


Displayen visar Smart nedräkning och varje segment visas i sekvens allteftersom testet fortskrider.



Om Smart nedräkning inte visas, se "Testfel".


## 3 Läs av resultatet

Smart nedräkning pågår under 1-5 minuter och sedan visas ditt resultat på displayen.

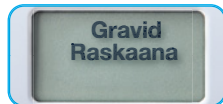

Du kan vara över 99 % säker på att du är gravid, oavsett när du testar.

Se Q1 för mer information.

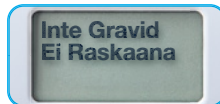

Om du testade tidigt finns det fortfarande en chans att du kan vara gravid eftersom mängden hormon ökar snabbt i början av graviditeten.

Se Q2 för mer information.

# Frågor och svar

## 1 Mitt resultat är Gravid. Vad bör jag göra?

Prata med din läkare som kan ge dig råd om vad du skall göra härnäst.

Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på att du inte längre är gravid, se Q6.

"Gravid"-resultatet fortsätter att visas på displayen i upp till 1 månad.

## 2 Mitt resultat är Inte Gravid. Vad betyder det?

Du kanske inte är gravid eller så är nivån av graviditetshormonet inte är tillräckligt hög för att detekteras ännu.

Testa igen om tre dagar. Kontakta din läkare om din mens är sen och testresultatet fortfarande är "Inte Gravid".

## 3 Hur tidigt kan jag testa?

Detta test kan användas från 6 dagar före din utbeblivna mens (5 dagar innan du förväntar dig din mens).

**Om ditt resultat är "Gravid" kan du vara över 99 % säker på att du är gravid, oavsett när du testar.**

Men eftersom hormonnivåerna varierar från kvinna till kvinna och kan vara mycket låga i början av graviditeten, kan du vara gravid men ändå få ett negativt resultat.

Diagrammet nedan visar procentandelen graviditeter som upptäcktes i labbtестning med urinprover som gjordes tidigt:

Dagar innan utbebliven mens	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Upptäckta graviditeter	> 99 %	> 99 %	> 99 %	99 %	93 %	78 %

## 4 Hur fungerar Clearblue?

Det detekterar graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin) i urinen. Testkänsligheten är 10mIU/ml. Det är över 99 % korrekt i laborietester från den dag du förväntar dig din mens.

## 5 Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

Läs alltid tillverkarens anvisningar för läkemedel du använder innan du gör testet.

Läkemedel som innehåller hCG och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan orsaka falskt positiva resultat. Vid graviditet utanför livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullbordades) kan du få missvisande resultat. Om du befinner dig i eller närmar dig klimakteriet kan du få ett falskt positivt gravidresultat även om du inte är gravid.

Testet påverkas normalt **INTE** av hormonbehandlingar som innehåller klomifencitrat, je eller av smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-piller. Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare/barmmorska.

## 6 Jag fick tidigare resultatet "Gravid" men sedan testade jag igen och fick resultatet "Inte Gravid" eller så fick jag min mens. Vad betyder det?

Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på att du inte längre är gravid. Detta kallas "spontan abort" vilket tyvärr inte är ovanligt och påverkar cirka 1 av 4 graviditeter. Lyckligtvis kan de flesta kvinnor ha en hälsosam graviditet efteråt.

## Kassera testet

Avlägsna batteriet innan teststickan kasseras. Kassering av batteriet ska ske enligt gällande återvinningsrutiner. För att avlägsna batteriet, sätt in **lockets böjda kant** på sidan av teststickan och vrid för att bryta upp stickan.

**Varning:** Montera inte isär batteriet, ladda eller bränn upp det. Kassera resterande del av stickan enligt gällande återvinningsrutiner för elektrisk utrustning. Bränn inte upp elektrisk utrustning.

# ! Testfel

## Felmeddelande

Ett fel har uppstått under testet. Det kan t.ex. vara så att:

- uppsugningsspetsen hölls uppåt
- testet lades inte platt efter att urinen hade applicerats
- för mycket eller för lite urin applicerades på spetsen

Gör om testet med en ny sticka och följ instruktionerna nog.

## Tom skärm

Om Smart nedräkning inte visades efter testning eller började räkna ner och sedan försvann från skärmen, måste du utföra ett nytt test. Testa igen med en ny sticka och följ instruktionerna nog.

## www.clearblue.com

Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.

**020 100 507** Samtalet är gratis.

Alla samtal spelas in och kan övervakas i kvalitetssyfte. Vänligen ha produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen, tillgängliga när du ringer.

Instruktioner för Clearblue Digitalt Ultratidigt, med 'CB15' tryckt på omslaget. För självtestning i hemmet. Endast för *in vitro*-diagnostik. Inte för invärtes bruk. Får inte återanvändas. Förvara oåtkomligt för barn. Förvara vid 2-30 °C. Om produkten har förvarats i kylskåp ska du låta den ligga i rumstemperatur i 30 minuter innan du utför testet. Använd inte testet om folieförpackningen är skadad. Använd inte efter att utgångsdatumet passerats. Innehåller små delar. Förtär inte någon del av den här enheten. Om du sväljer någon del av misstag, uppsök läkarvård. Rapportera eventuell skada orsakad av användningen av denna produkt till Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.

Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD.

© 2021 SPD. Med ensamrätt.

78 % av gravid-resultat kan detekteras 6 dagar före din utbeblivna mens (5 dagar innan du förväntar dig din mens).

Denna digitala IVD-enhet uppfyller strålnings- och immunitetskraven enligt EN 61326-2-6. De elektromagnetiska (EMC) motåtgärder som har byggts in i det elektroniska instrumentet ger tillräckligt skydd mot effekterna av elektromagnetisk interferens som kan förväntas förekomma i hemmiljöer. Följande preventiva varningar gäller för utrustning som är kompatibel med EN 61326-2-6.

a) Om detta instrument används i en torr miljö, särskilt i närheten av syntetiska material (syntetiska klädesplagg, mattor o.s.v.), kan det orsaka skadliga statiska urladdningar vilka i sin tur kan orsaka felaktiga resultat.

b) Använd inte detta instrument i närheten av starka källor av elektromagnetisk strålning (t.ex. mobiltelefoner), eftersom dessa kan påverka instrumentet.

	Tillverkare		Får inte återanvändas
	Medicinsk produkt för <i>in vitro</i> -diagnostik		Utgångsdatum
	Temperaturgräns 2-30 °C		Partikod

